

プライバシー保護、止血等用に三角巾が入っています。

人にかぶせてお使いください。



# 女性に配慮したAEDの使い方

パッドを

**素肌に直接貼り付ける**


ことができていれば、**ブラジャーを外す必要はありません。**

服の下で下着をずらして、**右の鎖骨の下と左のわき腹のあたりに**貼ることで対応できます。

**金属製品**（ブラジャーのワイヤー部分、ネックレス等）は**パッドに触れさせない**ようにしてください。

パッドに触れていなければ、ネックレスは無理に取り外す必要はありません。

AEDのパッドに描かれているイラストをご参照ください。

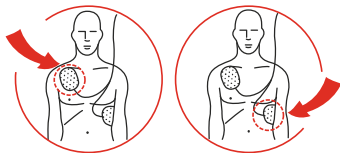

パッドを貼った後に

上から上着やタオルなどを

かけても大丈夫です。

## その他の注意事項

- \* 汗などで胸が濡れている場合は、水分を拭き取ってください。
- \* 電極パッドを貼る部分に貼り薬（湿布等）が貼られている場合は、貼り薬を剥がしてください。
- \* ペースメーカー等が植え込まれている場合（胸に硬いこぶのようなでっぱりが見える）は、このでっぱりを避けて電極パッドを貼ってください。
- \* 車内など、揺れている場所では使用しないでください。

【問合せ先】

市川三郷町役場

電話：055-272-1101

【監修】公益財団法人日本AED財団

【出典】東京都多摩府中保健所